

# Texto para insertar en la Guía del administrador de ZOLL® AED Plus®



**Importante:** Este símbolo indica que la unidad AED Plus está equipada para tratar a pacientes adultos y pediátricos. Una unidad AED Plus sin este símbolo no está equipada para tratar a pacientes pediátricos y *no funcionará* con electrodos pediátricos Pedi-padz® II. Para actualizar una unidad AED Plus para su uso con electrodos pediátricos ZOLL Pedi-padz II, póngase en contacto con ZOLL Medical Corporation o con un distribuidor de ZOLL autorizado para obtener información sobre el paquete de actualización pediátrica ZOLL AED Plus.

Si una unidad AED Plus está equipada para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos, al conectar el cable de los electrodos para adulto, la unidad AED Plus cambia automáticamente al modo para adultos de detección del ritmo cardíaco y a la selección automática de energía de descarga (120 julios, 150 julios, 200 julios), muestra la indicación *PARCHES PARA ADULTOS* en la pantalla y emite tres pitidos. Cuando se conecta el cable de los electrodos pediátricos ZOLL Pedi-padz II, la unidad AED Plus cambia automáticamente al modo pediátrico de detección del ritmo cardíaco y a la selección automática de energía de descarga (50 julios, 70 julios, 85 julios), muestra la indicación *PARCHES PEDIÁTRICOS* en la pantalla y emite tres pitidos.

## Aplicación de los electrodos Pedi-padz II (bebés/niños)


Prepare al paciente antes de fijar los electrodos Pedi-padz II.

### Para preparar al paciente:

1. Retire toda la ropa que cubra el tórax del paciente.
2. Asegúrese de que el tórax del paciente está seco.

### Para aplicar los electrodos Pedi-padz II:

1. Rasgue el paquete de los electrodos para abrirlo y despliegue el paquete interior para dejar los electrodos al descubierto. Coloque los electrodos en el paciente como se indica en los gráficos del paquete de electrodos.
2. Despegue el electrodo redondo del material protector y colóquelo sobre el tórax del paciente (como se muestra en los gráficos del paquete de electrodos).
3. Coloque la mano en el borde del electrodo y, utilizando la otra mano, deslice con suavidad el electrodo por el tórax del paciente describiendo un movimiento circular para eliminar el aire que pueda quedar debajo.
4. Dé la vuelta al paciente sobre su tórax, despegue el electrodo cuadrado del material protector y colóquelo en la espalda del paciente (como se muestra en los gráficos del paquete de electrodos).
5. Coloque la mano en el borde del electrodo y, utilizando la otra mano, deslice con suavidad el electrodo por la piel del paciente describiendo un movimiento circular para eliminar el aire que pueda quedar debajo.
6. Gire al paciente para acostarlo de espaldas y siga las indicaciones de ZOLL AED Plus.

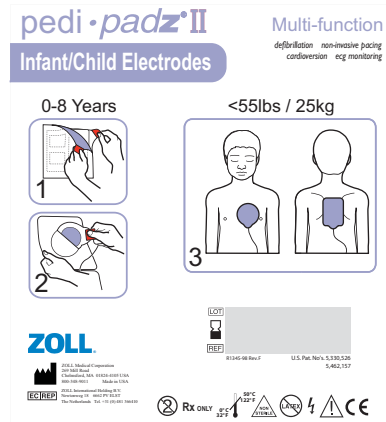

**NOTA** También puede usar Pedi-padz II (electrodos bebés/niños) para estimular hasta por una hora usando los productos de ZOLL con la función de marcapasos (consulte la *Manual del usuario de ZOLL M Series* para obtener información sobre la estimulación con marcapasos).

## Indicaciones de uso

Utilice ZOLL AED Plus cuando la víctima de una posible parada cardíaca presente una aparente FALTA DE CIRCULACIÓN, indicada por

- Inconsciencia y
- Ausencia de respiración normal y
- Ausencia de pulso o de signos de circulación.

Si la víctima tiene menos de 8 años de edad y pesa menos de 25 Kg (55 lbs), ZOLL AED Plus se debe utilizar con los electrodos pediátricos ZOLL AED Plus. No se debe retrasar el tratamiento para determinar la edad o el peso exactos del paciente.

